



Der natürliche Weg

cyclotest® control software

Gebrauchsanweisung

A circular image of a CD-ROM. The CD surface is light grey and features the "cyclotest control software" logo and text. In the center of the CD is a white circular hub with a smaller white circle in the middle. The background of the CD is a black and white photograph of a smiling couple embracing. The UEBE Germany logo is visible in the bottom right corner of the CD image.

cyclotest® control
software

7 06655 002 A März 09

UEBE
Germany

UEBE
Germany


Fruchtbarkeitsprofil	3
Installation	4
Installation USB-Treiber	4
Installation cyclotest® control software	7
Technische Informationen	8
Zeichenerklärung	9
Garantie	10
Die cyclotest® service hotline	11

Vielen Dank, dass Sie sich für die cyclotest® control software entschieden haben.

Die cyclotest® control software ist eine Zusatzsoftware zur Übertragung und Auswertung von Messdaten des Zyklus-Temperaturcomputers cyclotest® control auf einen PC.

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Anweisungen und Hinweise in der Gebrauchsanleitung des Gerätes.

Mit Hilfe dieser Software und der in cyclotest® control integrierten USB-Schnittstelle ist es möglich, die Daten des aktuellen Zyklus aus dem Gerät auszulesen und ein Fruchtbarkeitsprofil als PDF Dokument zu erstellen.

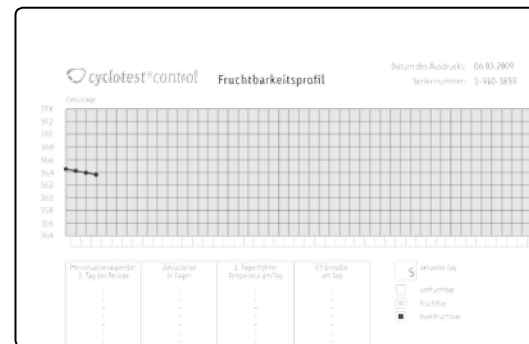

Dieses PDF Dokument können Sie ausdrucken, abspeichern oder per Mail verschicken.

Eine händische Protokollführung wird dadurch gänzlich unnötig.

Während Ihr Frauenarzt in der Vergangenheit noch die Führung eines Menstruationskalenders empfahl, kann er heute Ihr cyclotest® control Fruchtbarkeitsprofil studieren.

Hinweis: Sobald ein neuer Zyklusstart eingegeben wurde, kann aus dem vorangegangenen Zyklus kein Fruchtbarkeitsprofil mehr erstellt werden.

Installation

Damit die Kommunikation zwischen cyclotest® control und Ihrem PC funktioniert, müssen Sie einmalig die Treiber für die USB Schnittstelle und das cyclotest® Programm installieren. Eine detaillierte Installationsanleitung erhalten Sie auch als Download unter www.cyclotest.de.

Installation USB-Treiber

Unterstützte Betriebssysteme: Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows 98, Windows ME

Bevor Sie die Daten aus cyclotest® control auslesen können, müssen Sie die Treiber für den USB Anschluss installieren.

Wichtig! Bitte schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel zuerst an den PC an, danach an cyclotest® control.

Nach Anschluss des Gerätes an den PC erscheint folgendes Bild:



Bitte wählen Sie den letzten Auswahlpunkt „Nein, diesmal nicht“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Installation



Legen Sie die mitgelieferte cyclotest® CD in das CD-ROM Laufwerk Ihres PC und klicken Sie auf „Weiter“. Der Treiber wird automatisch von der eingelegten CD installiert.



Beenden Sie die Installation im letzten Fenster mit „Fertig stellen“.



Danach erscheint nochmals dieses Fenster. Bitte den letzten Auswahlpunkt „Nein, diesmal nicht“ auswählen und auf „Weiter“ klicken.



Im nächsten Fenster auf „Weiter“ klicken. Der Treiber wird dann automatisch von der eingelegten CD installiert.



Beenden Sie die Installation im letzten Fenster mit „Fertig stellen“.

Sie haben den Treiber für die USB-Schnittstelle Ihres cyclotest® control erfolgreich installiert und können nun die cyclotest® control software installieren.

Falls es zu Problemen oder Fehlern während der Installation gekommen ist, steht Ihnen die cyclotest® service hotline gerne unter Tel. 0 93 42 / 92 40 40 zur Verfügung.

Installation cyclotest® control software

Legen Sie die cyclotest® control software in Ihr CD- oder DVD-Laufwerk ein. Durch die Autorun Funktion startet das Setup Programm automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, starten Sie bitte über den Windows Explorer das Setup-Programm manuell. Doppelklick auf [Laufwerk]:\setup.exe – dabei steht [Laufwerk] für den Buchstaben ihres CD/DVD-Laufwerks.

Als Erstes erscheint die Nutzungsbedingung des eingesetzten .NET Framework 2.0, diese bitte mit „Ich stimme zu“ bestätigen. Danach erscheint die Meldung, dass .NET Framework 2.0 installiert wird:



Die Installation kann je nach Hardwarekonfiguration ein paar Minuten dauern.

Sobald der Hinweis zur Installation der cyclotest® control software erscheint, diesen bitte mit „installieren“ bestätigen.

Anschließend startet sich das Programm und Sie können cyclotest® control an den PC anschließen.

Um die Daten auslesen zu können, drücken Sie bitte, nachdem Sie das Kabel eingesteckt haben, die große runde Messtaste und die kleine runde Zyklusstarttaste für ca. 3 Sekunden, bis auf dem Display „USB“ erscheint.



Danach können Sie mit einem Klick auf den Button „Fruchtbarkeitsprofil auslesen“ die Daten aus dem Gerät auslesen und anzeigen lassen.

Für die Darstellung auf ihrem PC benötigen Sie einen PDF Reader. Auf der cyclotest® CD ist eine kostenlose Version des Acrobat Readers enthalten. Den PDF Reader können Sie auch als Download unter www.cyclotest.de erhalten.

Technische Informationen

Zusätzliche Geräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen nachweisbar ihren entsprechenden IEC oder ISO Normen entsprechen (z. B. IEC 60950 für datenverarbeitende Geräte). Weiterhin müssen alle Konfigurationen den normativen Anforderungen für medizinische Systeme entsprechen (siehe IEC 60601-1-1 oder Abschnitt 16 der 3. Ausgabe der IEC 60601-1, jeweilig). Wer zusätzliche Geräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, ist Systemkonfigurier und damit verantwortlich, dass das System mit den normativen Anforderungen für Systeme übereinstimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass lokale Gesetze gegenüber obigen normativen Anforderungen Vorrang haben. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Fachhändler oder den Technischen Dienst.

Durch die Installation, das Kopieren oder die anderweitige Nutzung dieser Software erkennen Sie die nachfolgend aufgeführten Haftungsbeschränkungen an.

Im größtmöglichen, durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang lehnen die UEBE Medical GmbH und deren Lieferanten jede Haftung für irgendwelche besonderen, zufälligen, indirekten oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder irgendwelchen anderen Vermögensschäden) ab, die durch die Verwendung der Software oder durch die Tatsache, dass sie nicht verwendet werden kann, entstehen; dies gilt auch dann, wenn die UEBE Medical GmbH zuvor auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung der UEBE Medical GmbH und ihrer Lieferanten nach dieser Vereinbarung auf den tatsächlich von Ihnen für die Software gezahlten Betrag, wenn die Auswirkung dieser Klausel durch geltendes Recht nicht besonders ausgenommen wurde.

Jeglicher Verleih bzw. unerlaubte Vervielfältigung, Aufführung oder Sendung der auf dem Datenträger enthaltenen Informationen verstößt gegen geltendes Recht. Diese Software-Lizenzvereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Zeichenerklärung



Gebrauchsanweisung beachten!



USB

USB Schnittstelle zur Verbindung mit einem PC



Trocken halten

Das Produkt wurde mit aller Sorgfalt hergestellt und geprüft. Für den Fall, dass es trotzdem bei Auslieferung Mängel aufweisen sollte, geben wir eine Garantie zu den nachfolgenden Konditionen:

1. Während der Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum beheben wir solche Mängel nach unserer Wahl und auf unsere Kosten durch Reparatur (nach Rücksendung in unserem Werk) oder Ersatzlieferung eines mangelfreien Gerätes.
2. Nicht unter die Garantie fallen die normale Abnutzung von Verschleißteilen oder Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, unsachgemäße Handhabung (z. B. Bruch, Wasserschaden) und/oder Demontage des Produktes durch den Käufer entstehen. Ferner werden durch die Garantie keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.
3. Garantieansprüche können nur in der Garantiezeit und durch Vorlage des Kaufbeleges geltend gemacht werden. Im Garantiefall ist das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg und Beschreibung der Reklamation zu senden an UEBE Medical GmbH, Service-Center, Zum Ottersberg 9, 97877 Wertheim, Germany.
4. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gemäß § 437 BGB werden durch die Garantie nicht einge-


Bitte beachten Sie: Im Garantiefall bitte unbedingt den Kaufbeleg beilegen.

Liebe Leserin,

sicher haben Sie unsere Hinweise zur Verwendung der cyclotest® control software sorgfältig gelesen und sich mit den Funktionen vertraut gemacht.

Bei der Beschäftigung mit cyclotest® control kann es am Anfang vorkommen, dass Fragen zur Handhabung auftauchen.

In solchen Fällen können Sie unsere cyclotest® service hotline anrufen, die montags bis donnerstags von 7.30 bis 17.00 Uhr und freitags bis 16.30 Uhr besetzt ist.

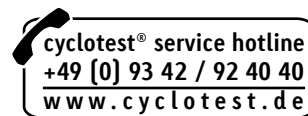

Auf das Gespräch mit Ihnen freut sich Ihr cyclotest® Beratungsteam.

UEBE **REF** 065501

PZN 5103265

7 065501 001 A
Mai 09

cyclotest® und UEBE® sind international
geschützte Warenzeichen der

UEBE Medical GmbH

Zum Ottersberg 9

97877 Wertheim, Germany

Phone: + 49 [0] 93 42 / 92 40 40

Fax: + 49 [0] 93 42 / 92 40 80

E-Mail: info@uebe.com

Internet: www.uebe.com

Technische Änderungen vorbehalten.

© Copyright 2009 UEBE Medical GmbH

**UEBE**
Germany